

Ami

azamed
www.azamed.com.tr

ESTETİK TIPTA İNNOVASYON



E-Katalog

ANTIGE

Fraksiyonel Mikro-İğneli RF

UTS
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

CE

☑ Cihaz Genel Tanıtımı

ANTIGE, cilt yüzeyinden geçerken genellikle cilt yüzeyine zarar veren geleneksel lazerlerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış fraksiyonel radyofrekans mikro-iğne cihazıdır.

ANTIGE, cilt yüzeyine doğrudan enerji iletilmesini önleyen ve yüzeysel hasarı azaltan koruyucu bir kaplamaya sahiptir.


Uygulama süreci pıhtılaşmış dokular oluşturarak iyileşmeyi destekler ve bol miktarda kolajen tabakası üretir. RF özelliği, her atımda kontrollü enerji dağılımı sağlayarak tutarlı ve optimal klinik sonuçlar elde edilmesini sağlar.



☑ Cilt yüzeyinde minimum hasar

Geleneksel lazerlerin dezavantajı, her zaman cilt yüzeyine nüfuz ettikleri için cilt yüzeyine zarar verme potansiyeline sahip olmalarıdır.

Buna karşılık, ANTIGE genellikle dermise doğrudan nüfuz eden ve cilt yüzeyine zarar vermeden optimum yüksek frekanslı enerji sağlayan yalıtımlı mikro iğneler kullanır.

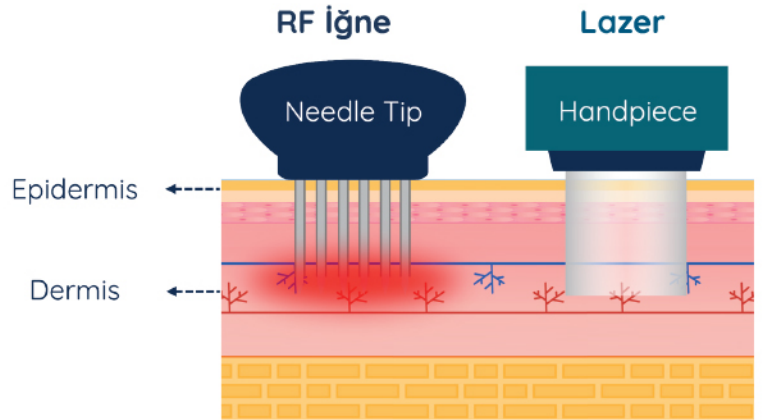

☑ Kısa iyileşme süresi

Yalıtımlı iğneler dermise doğrudan nüfuz ederek cilt yüzeyindeki hasarı en aza indirir.


Bu sayede tedavi sonrası sadece 1 ila 2 gün arasında minimum iyileşme süresi gerekir. Böylece hastalar normal aktivitelerine hızla dönebilirler.

Sadece 1 - 2 gün




✓ Klinik ihtiyaçlara uygun iğne uçları

ANTIGE, hastanın durumuna göre çeşitli klinik ihtiyaçlara uygun bir dizi uç sunar. Doktorlar, her hasta için en uygun uçları seçerek en iyi klinik sonuçları elde edebilirler.

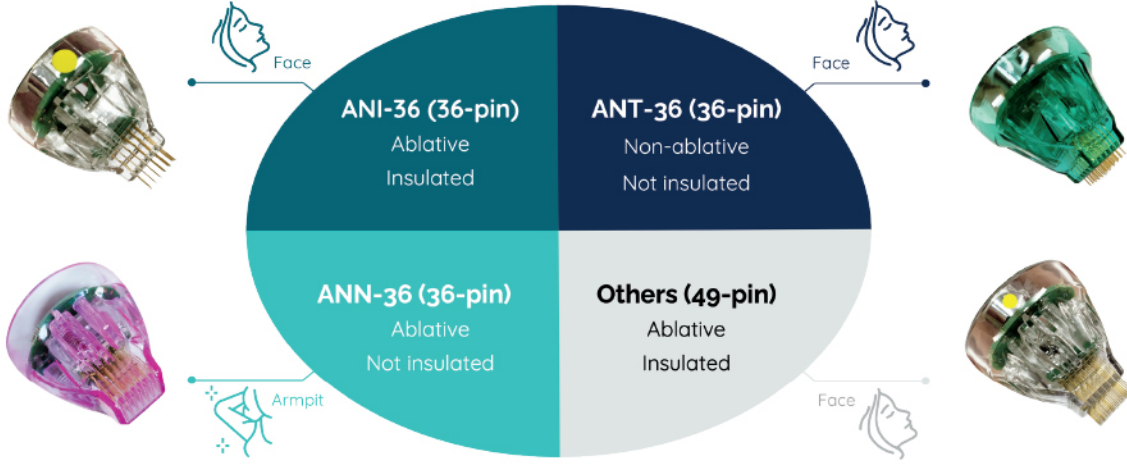

✓ 0.5 - 4.0 mm arası derinlik kontrolü

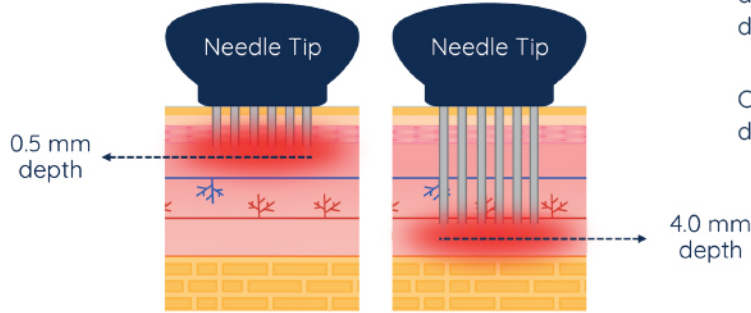

Cilt katmanında klinik ihtiyaca uygun ayarlanabilir iğne ucu penetrasyon derinliği.

Cilt yüzeyinin 0,5 ila 4,0 mm altında değişken penetrasyon derinliği.

✓ Otomatik / Manuel çalışma modu



Otomatik Mod

İğne penetrasyonu ve RF enerjisinin başlatılması seçilen tekrarlama oranına göre otomatik olarak gerçekleşir.



Manuel Mod

Hekimin kendi tedavi tekniği ve hızına göre ayak pedalını kullanarak tekrarlama oranını manuel olarak kontrol edebilir.



RF mikro-iğne

Cilt yüzeyinde
minimum hasar

Kısa iyileşme süresi

1 - 2 gün

Mikro-iğne Çeşitliliği

Klinik ihtiyaçlara
uygun iğne uçları

Derinlik Kontrolü

0.5 - 4.0 mm arası
derinlik kontrolü

Çalışma modları

Otomatik ve
Manuel modu

Geliştirilmiş protokol

Geliştirilmiş tedavi
protokolüne erişim

✓ Klinik Endikasyon

**Cilt Gençleştirme**

- Kırışıklıklar
- Geniş Gözenekler
- Akne Skarı

Striae (Çatlak)**Cilt Rengi Değişimi**

- Diskromi
- Hiperpigmentasyon

Cilt Sıkılaştırma

- Yüz Sıkılaştırma
- Boyun Sıkılaştırma
- Vücut Sıkılaştırma

Aşırı Terleme

- Hiperhidroz
- Koltuk altı osmidrozu

✓ Teknik Özellikler

Güç	40 W
Derinlik Seviyesi	0.5-4.0 mm
Tekrarlama Süresi	0.5 s - 3.0 ms, OFF
Tekrarlama Hızı	1 MHz /2 MHz
Çıkış Yoğunluğu	Single Atım: 1 - 50 level, Double Atım: 1 - 100 level
Çalışma Modu	Otomatik / Manuel
Mikro-iğne Uçları	ANI-36 (36-pin): Ablatif iğne, izoleli ANT-36 (36-pin): Non-ablatif iğne, izolesiz ANN-36 (36-pin): Ablatif iğne, izolesiz Diğerleri (49-pin): Ablatif iğne, izoleli
Uygulama Alanı	15 mm x 15 mm
Elektrik Akım Gereksinimi	100-240 VAC, 50/60 Hz
Ölçüler (G*U*Y)	380 mm (G) X 440 mm (U) X 1150 mm (Y)
Ağırlık	22 Kg